

Sedens 400

Coussin de Siège Hybride

Un coussin de siège léger et compact

Le Sedens 400 s'aligne sur la directive clinique 2019, offrant des coussins et des supports dorsaux qui préviennent les lésions tissulaires et gèrent la pression de manière effective. Doté d'une conception hybride air/mousse, il redistribue la pression de manière effective.

La valve d'air innovante permet de contrôler les niveaux d'immersion pour une distribution optimale de la pression. Conçu avec une sélection minutieuse des matériaux et des revêtements, le Sedens 400 garantit des performances constantes, réduisant ainsi le risque de lésions dues à la pression. L'inspection et l'évaluation régulières de nos solutions d'assise garantissent une assistance et une efficacité à long terme.



Coussin Facile à Installer

Les coussins sont conçus pour être facilement assemblés, offrant un confort instantané sans besoin d'électricité.



Conception Anti-Basculement


L'enveloppe en mousse de la structure en forme de cellule d'air est conçue pour réduire le risque de basculement pour la sécurité du patient.

Sedens 400

Un coussin innovant et auto-reglable
Pour une assise personnalisée et évolutive

Cellules hybrides

Conception d'un coussin en une seule pièce avec structure en forme de six cellules d'air et enveloppe en mousse.

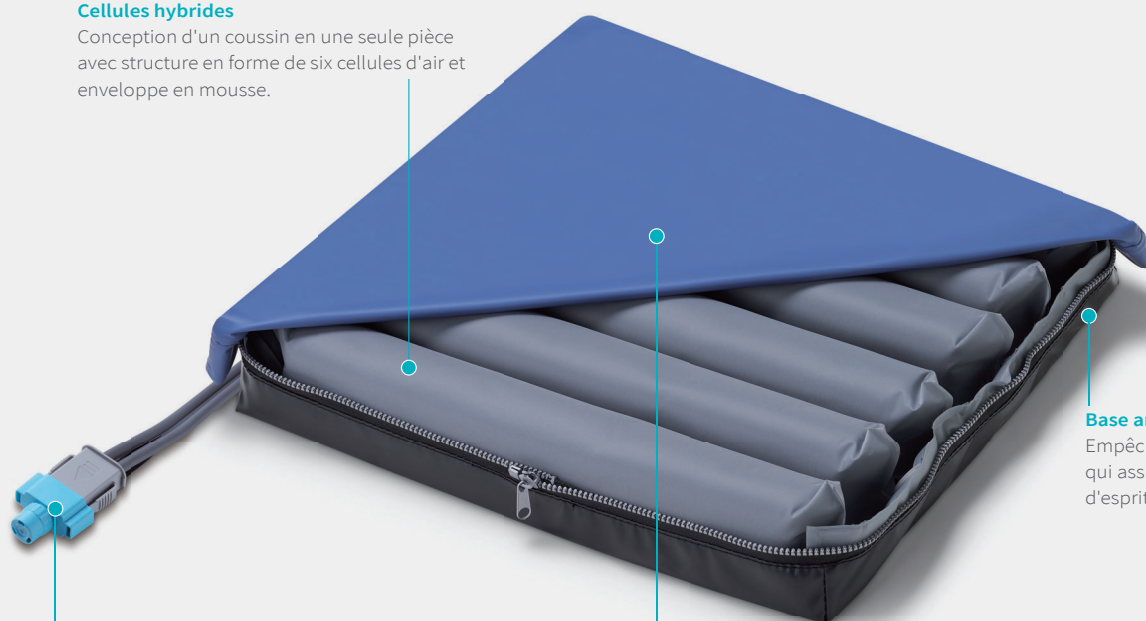


Capuchon avec soupape de réglage de la pression

Soupape d'air innovante permettant de contrôler le degré d'immersion pour les une répartition optimale de la pression.

Top Cover 4 Way Stretch

Ils offrent un faible cisaillement, une faible friction, une perméabilité à la vapeur et une protection contre l'humidité, associés à une immersion et un enveloppement optimaux.

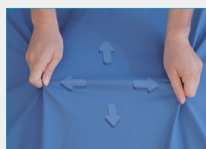

Base antidérapante

Empêche le glissement, ce qui assure la tranquillité d'esprit de l'utilisateur.



Résistance à l'eau



Résistance à la flamme



Biocompatibilité



Perméable à la vapeur d'eau



Fongistatique



4-Way Stretch

Spécifications	Sedens 400				
Cushio	Dimension	Cellules	Longueur	Largeur	Hauteur
		6	44cm	41cm	9cm
	Poids	1.1 kg			
	Matériau de la housse	Poly / PU			
	Matériau cellulaire	Nylon / PU			
	Matériau de base	PVC			
Poids maximal du patient	120kg				

Normes d'ignifugation des coussins (EN597-1, EN597-2), RoHS, WEEE

