

Marc Kerharou : 06.17.01.07.55
 Directeur Commercial
 marc.kerharou@wellell.com


Maxime Manet : 06 38 23 93 55
 Technico-commercial
 maxime.manet@wellell.com

Aurélien Gleizes : 07 85 72 35 06
 Technico-commercial
 aurelien.gleizes@wellell.com

Amaury Peniguel : 06.71.24.55.06
 Technico-commercial
 amaury.peniguel@wellell.com

Julien Coutarel : 07.58.08.67.57
 Technico-commercial
 julien.coutarel@wellell.com

Julien D'agaro : 06.15.68.08.93
 Technico-commercial
 julien.dagaro@wellell.com

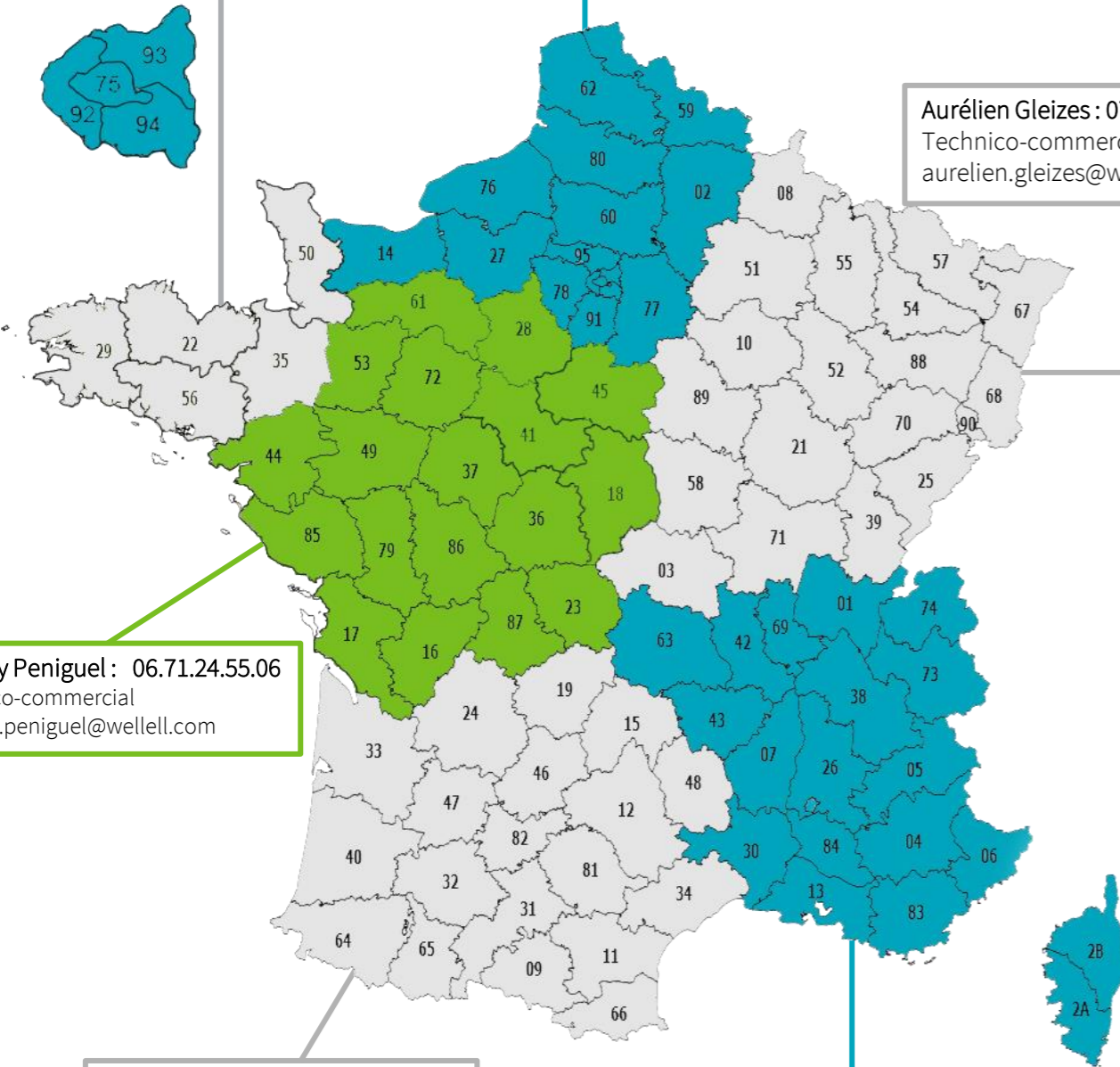

Distributed by

FRANCE
 Wellell France SAS
 4 Blvd. de La Chanterie,
 49124 Saint Barthélemy d'Anjou,
 Pays De La Loire, France
 T +33 272 792 713 / F +33 285 730 767
 adv.france@wellell.com

SIEGE SOCIAL - WELLELL Inc.
 No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng, New Taipei City,
 23679, Taiwan T +886 2 2268 3100
 F +886 2 2268 6525

Print-2022
 All rights reserved Specifications may change without notice.
 www.wellell.com



Pro-care Auto

Matelas à Redistribution alternée des Pressions


- Convient aux patients présentant un risque élevé à très élevé d'escarres.
- Pression Dynamique totale cell on cell pour un meilleur confort et meilleure stabilité
- Mode alternatif basse pression
- Système à double compresseur conçu pour soigner les patients en silence et en continu




Pro-care Auto

Matelas à Redistribution Alternée des Pressions

« Pro-care, parfaitement confortable »

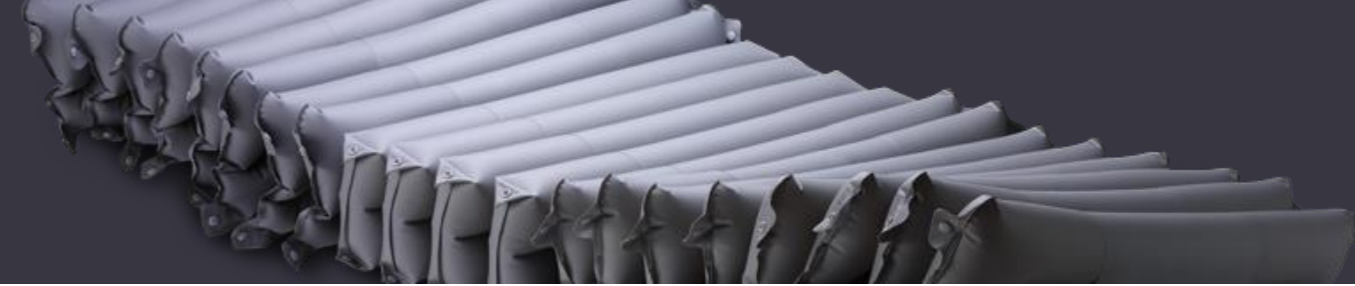

Cellules cell-in-cell (zone sacrée)
Excellente stabilité en position assise, pas de talonnement, facilite le transfert des patients. Les cellules rectangulaires offrent un soulagement des pressions.

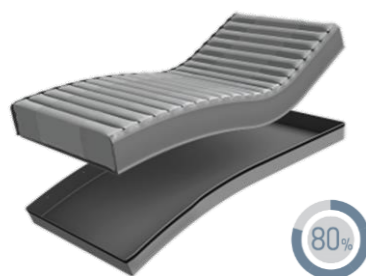

80% d'économie de temps
Pendant la décontamination, les cellules peuvent être retirées facilement de la base

Cellules Silencieuses
Un choix parfait de matériaux cellulaires pour réduire le bruit lors du déplacement. Réduction du risque de friction

Micro faible perte d'air
Bonne ventilation et aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité

Décharge Totale des Talons
Prévention des escarres sur les talons grâce à une déconnexion sécurisée des 5 dernières cellules

Pompe silencieuse
Réduction des vibrations de la pompe. Améliore la qualité de soins aux patients (<20 dBA)

Un système plus durable grâce aux doubles compresseurs
Avoir la capacité de non seulement raccourcir la préparation du matelas temps mais aussi une meilleure longévité du compresseur

Indicateur des fonctions
Affichage facile à lire pour une configuration plus rapide



Base PU antidérapante
Empêche le matelas de glisser hors du lit



Bouchon étanche
Stoppe l'infiltration de liquide à l'intérieur du matelas pendant la décontamination




Housse élastique dans les 4 sens


- Antimicrobienne
- Faible friction et cisaillement
- Imperméable aux liquides, perméable à la vapeur d'eau
- Ignifugée



Connecteur rapide Mode Transport
Le matelas passe en fonction statique pour une utilisation en mode transport (12 heures d'autonomie)

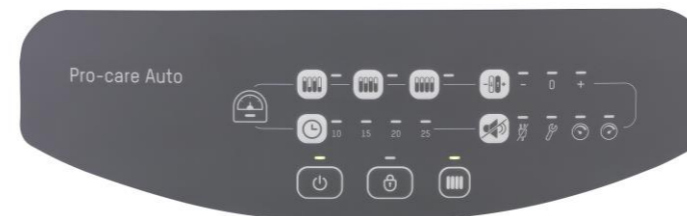

Réglage automatique (Pro-care Auto / Pro-care Auto Bariatrique)
Fournit une répartition optimale des pressions, basée sur la morphologie et le poids du patient sans réglage manuel

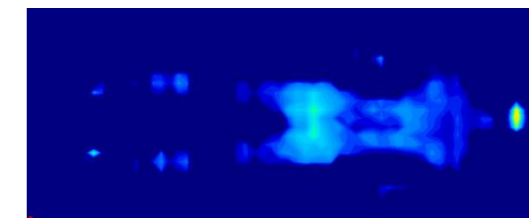

Total dynamique
La pression dynamique change également sur l'ensemble de la cellule ainsi que la partie statique (cell-on-cell). En cas d'arrêt du compresseur le patient sera protégé pendant 8 heures sans être en contact avec le sommier du lit

Alternance Basse Pression, Une Alternance Légère
La fonction nouvellement conçue offre une alternance modérée pour les personnes sensibles les patients qui cherchent une plus grande exigence pour le confort



Caractéristiques Techniques Pro-care Auto / Bariatric

Modèle		Pro-care Auto	Pro-care Auto Bariatric
Compresseur	Dimensions	34 x 13.5 x 20.5 cm	34 x 13.5 x 20.5 cm
	Poids	3,8 kg	3,8 kg
	Matériau boîtier	ABS Ignifugé	ABS Ignifugé
	Alimentation	AC 220 - 240V , 50Hz	AC 220 - 240V , 50Hz
Matelas	Temps de cycle	10, 15, 20, 25 min.	10, 15, 20, 25 min.
	Dimensions	200 x 80/85/90/100 x 20 cm	200 x 107/122 x 20 cm
	Hauteur cellule	20/21 cellules (cell-on-cell) 20 cm	20 cellules (cell-on-cell) 20 cm
	Poids	10 Kg	13 Kg
Matériau Housse		Elastique stretch intégrale	Elastique stretch intégrale
Matériau Cellule		TPU	TPU
Poids maxi patient		250 kg	450 kg
Normes Feu		EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2