


Relievo Profisoft

Matelas à haute élasticité

Matelas en polymère cellulaire de très haute élasticité. Les propriétés mécaniques de cette nouvelle génération de matelas garantissent de réelles performances pour le confort et la prévention des escarres répondant aux risques moyen à élevé.

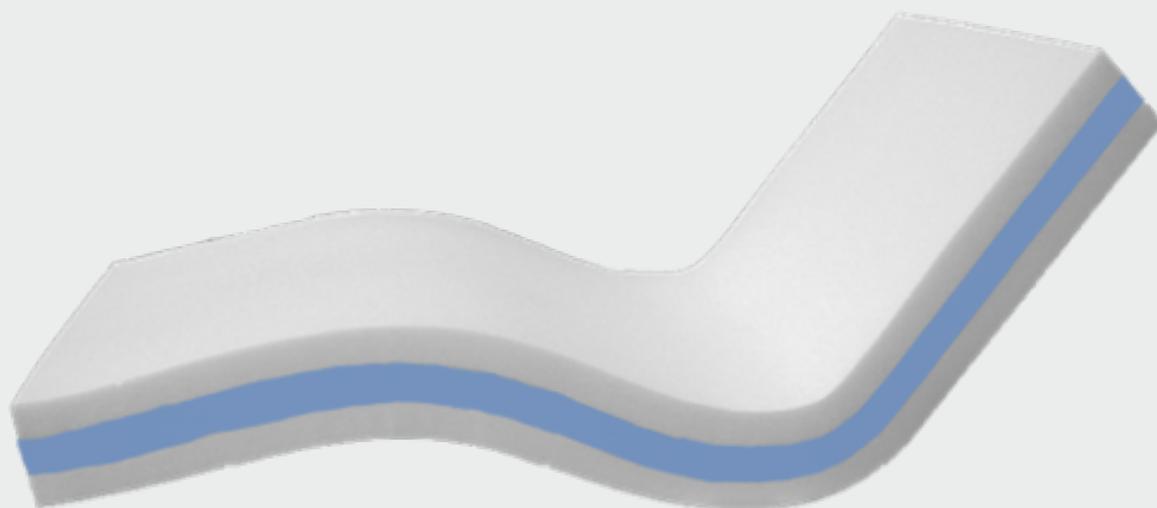

Le concept Relievo Profisoft associe densité et haute élasticité pour offrir une mousse plus flexible et plus tonique :

- S'adapte à toutes les morphologies
- Réagit au changements des points d'appui
- Assure un réel allégement de la pression pour toutes les zones à risque



Housse soudée élastique dans les 4 sens

- Faible friction et cisaillement
- Imperméable aux liquides, perméable à la vapeur d'eau
- Ignifugée




Relievo Profisoft

Matelas à haute élasticité



Matelas de conception multistrates : pas de sens d'utilisation. Limite les erreurs d'utilisation. Matelas réversible dans les 4 sens.

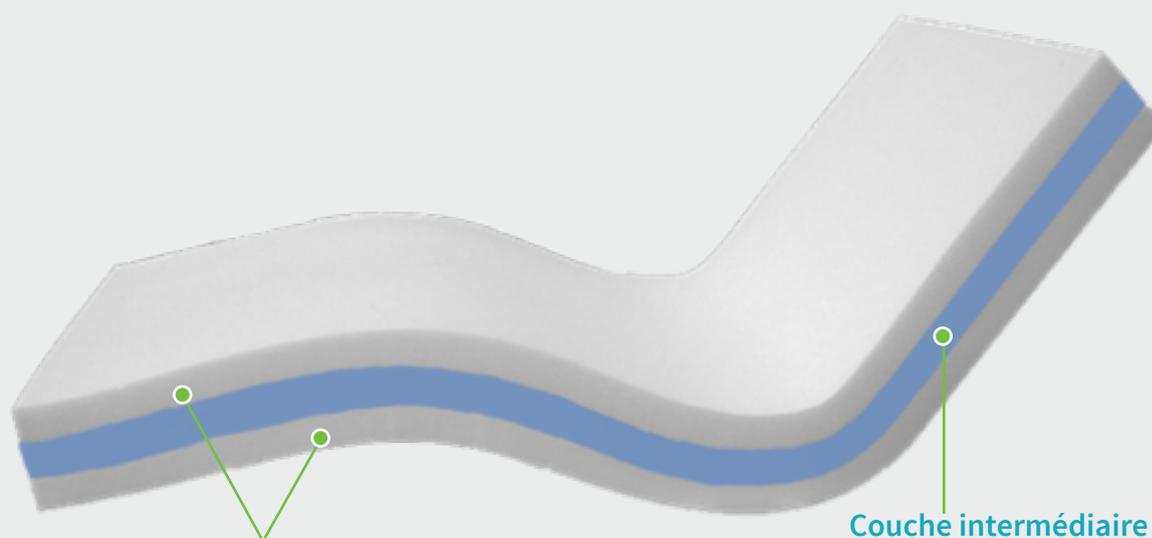

Couche supérieure et inférieure
HR Soft 40029 blanc épaisseur 50 mm.

Couche intermédiaire
LS45032 bleu clair épaisseur 50 mm. La fermeté de cette mousse facilite le transfert et favorise la mobilité du patient.

Le matelas **Relievo** offre une **parfaite aération** du matelas grâce à la structure **cellulaire ouverte** de la mousse et **limite ainsi les phénomènes de macération** contrairement aux mousses Viscoélastiques.

Spécifications	Relievo Profisoft	
	Dimensions	200 x 90 x 15 cm
	Hauteur des cellules	Hauteur mousse : 15 cm
	Poids	10 Kg
	Matériau	HR Soft 40029 blanc / LS445032 bleu
	Normes feu	NF EN 597 parties 1 et 2
	Poids maximal du patient	150 Kg
	Matériau housse	Polyuréthane / polyester
	Garantie	5 ans pour la mousse 1 an pour la housse
	Classe du dispositif médical	1

