

Marc Kerharou : 06.17.01.07.55
Directeur Commercial
marc.kerharou@wellell.com

Maxime Manet : 06 38 23 93 55
Technico-commercial
maxime.manet@wellell.com

Aurélien Gleizes : 07 85 72 35 06
Technico-commercial
aurelien.gleizes@wellell.com

Amaury Peniguel : 06.71.24.55.06
Technico-commercial
amaury.peniguel@wellell.com

Julien Coutarel : 07.58.08.67.57
Technico-commercial
julien.coutarel@wellell.com

Julien D'agaro : 06.15.68.08.93
Technico-commercial
julien.dagaro@wellell.com

Distributed by

FRANCE
Wellell France SAS
4 Blvd. de La Chanterie,
49124 Saint Barthélemy d'Anjou,
Pays De La Loire, France
T +33 272 792 713 / F +33 285 730 767
adv.france@wellell.com

SIEGE SOCIAL - WELLELL Inc.
No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng, New Taipei City,
23679, Taiwan T +886 2 2268 3100
F +886 2 2268 6525

Print-2020
All rights reserved Specifications may change without notice.
www.apexmedicalcorp.com



Sedens 500

Coussin à air motorisé

- Le coussin Sedens 500 est composé de 4 cellules à air à pression alternée insérées dans une base mousse.
- Ce coussin convient parfaitement pour l'aide à la prévention et au traitement des escarres pour les patients à mobilité réduite et présentant un risque élevé d'escarres

Sedens 500

REF – 9C048010 (43 x43 cm)
REF – 9C048h10 (46 x46 cm)

- Dimensions : 43 x 43 x10 cm + 46 x 46 x10 cm



De 0 à 120 Kg



Base Mousse
Galbée et évidée sur les points d'appui pour assurer une base stable et favoriser l'alignement des membres inférieurs.

Cellules
4 cellules à air à pression alternée insérées dans une base mousse



Pochette de transport



Base PU antidérapante
Empêche le coussin de glisser hors du fauteuil.



Housse élastique dans les 4 sens

- Faible friction et cisaillement
- Imperméable aux liquides, perméable à la vapeur d'eau,
- Ignifugée.



Réglage du poids jusqu'à 120 kg




Modes Thérapeutiques

- Mode Dynamique :** Alternance 1-sur-2 les cellules se gonflent et se dégonflent en continu, de façon alternée
- Mode Statique :** Pression identique sur toutes les cellules

Cycles :

- 3 Temps de Cycle : 10, 15, 20 min, Pour une personnalisation de la thérapie

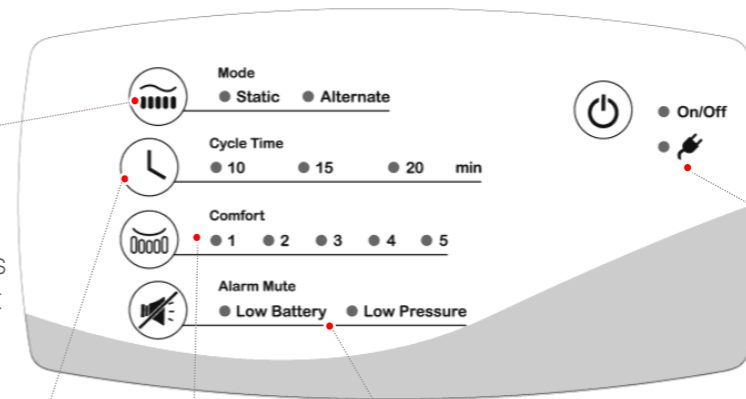

5 niveaux de confort :

- 1 : 0-40 Kg
- 2 : 40-60 Kg
- 3 : 60-80 Kg
- 4 : 80-100 Kg
- 5 : 100-120 Kg



Autonomie
12 heures – Batterie rechargeable Lithium.



Gestion des alarmes :

- Low Pressure :** pression trop basse
- Indicateur de batterie faible :** indique qu'il reste 1h, il est souhaitable de recharger la batterie.
- Appuyer sur pour stopper le son de l'alarme

Indicateur de recharge de la batterie :

- Lorsque le voyant est allumé, l'alimentation secteur recharge la batterie. Le voyant rouge s'éteint lorsque la batterie est pleine.

Caractéristiques Techniques

	Sedens 500
Dimension Coussin	43 x 43 x 10,2 cm & 46 x 46 x 10,2 cm
Poids Coussin	1.1 Kg (43x43) 1,2 Kg (46x46)
Batterie	Batterie Lithium, autonomie 12h
Temps de cycle	10, 15, 20 minutes
Mode Thérapeutique	Dynamique (Alternate), Statique
Partie sup. housse	Housse zippée Bi-élastique
Cellules	4 cellules
Partie inf. housse	Nylon/PU
Poids maximum patient	120 kg
Norme feu	EN 597-1, EN 597-2

